



YOTL Spektren importieren


1. Im BioTyper Import-Dialog öffnen

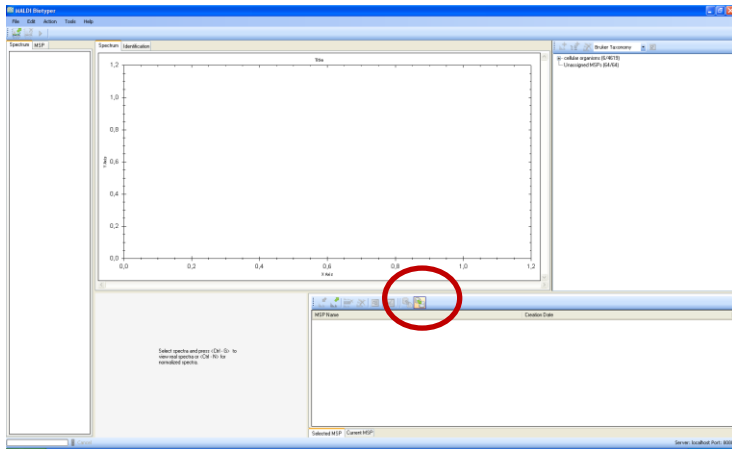


2. Zu importierende Datei auswählen

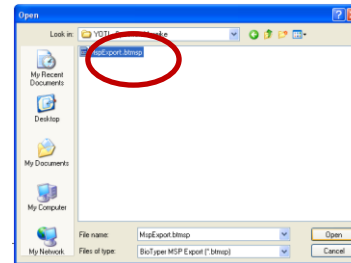


3. Alle Spektren importieren

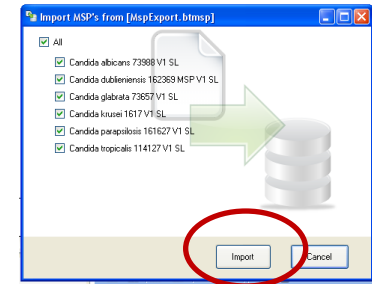

4. warten...

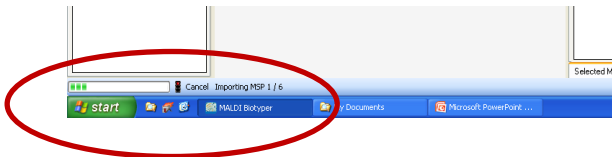


5. Die importierten MSP findet man nun unter „current MSP“

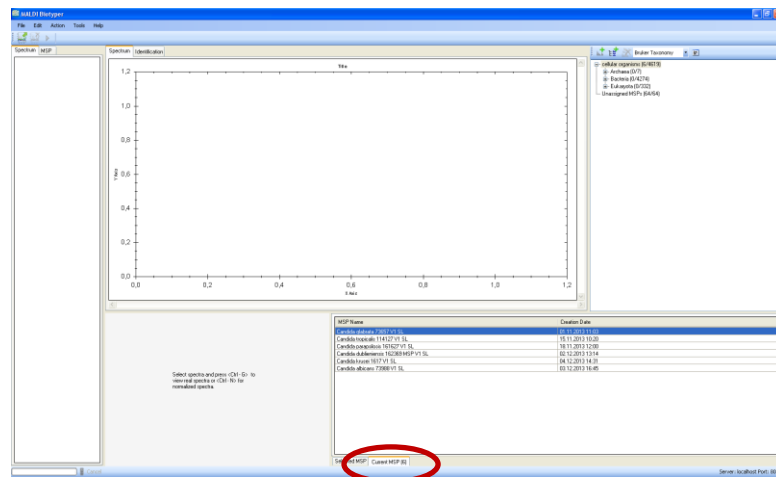

6. Alle YOTL-Spektren markieren




8. Nun die alte Datenbank hinzufügen („add hierarchy to selected MSP“)

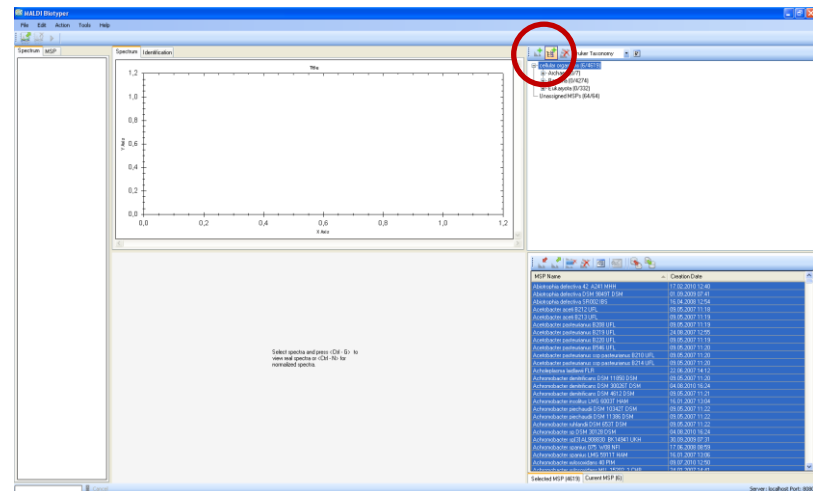


Neue Library abspeichern


9. Alle „selected MSP“ auswählen

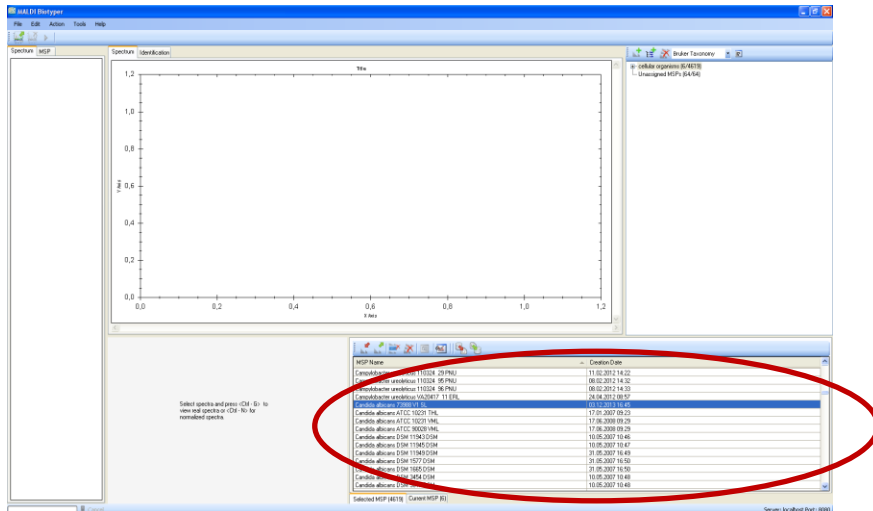

11. Neuen Namen vergeben oder älter überspielen (cave: nicht BDAL o.ä.!)

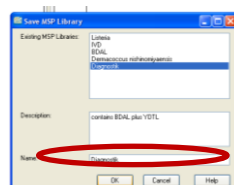

10. „Save MSP Library“

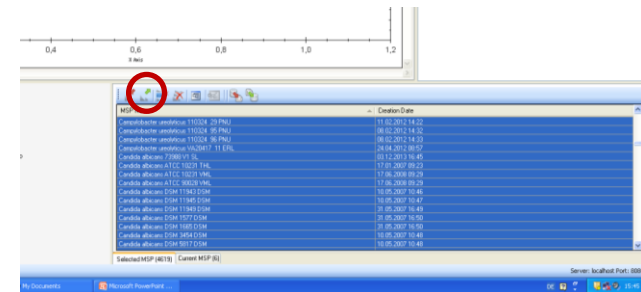

12. Fertig.

Die neue kombinierte Library taucht nun im Auswahldialog des RTC-Clients auf, nicht vergessen die KollegInnen darauf hinzuweisen, dass nun eine andere Library verwendet werden muss.